



# SARAYA

## ノータッチ式ディスペンサー UD-9600R

手を差し出すとセンサーが自動感知、  
ノータッチで石けん液や手指消毒剤を吐出します。



石けん液専用  
**UD-9600RS**  
商品コード 41635  
W139×D99×H248mm  
石けん  
泡状/液状  
壁付型  
アルカリ  
乾電池  
自動で出る  
AUTO

手指消毒剤専用  
**UD-9600RA**  
商品コード 41634  
W139×D99×H248mm  
消毒  
噴射/ジェル状/泡状  
壁付型  
アルカリ  
乾電池  
自動で出る  
AUTO

## プッシュ式ディスペンサー **MD-9600R** 来春発売



手でレバーを押すと、  
石けん液や手指消毒剤を吐出します。



石けん液専用  
**MD-9600RS**  
商品コード 41619  
W135×D104×H248mm  
石けん  
泡状/液状  
壁付型  
アルカリ  
乾電池  
手押し  
電源不要

手指消毒剤専用  
**MD-9600RA**  
商品コード 41618  
W135×D104×H248mm  
消毒  
噴射/ジェル状/泡状  
壁付型  
アルカリ  
乾電池  
手押し  
電源不要

### 製品仕様

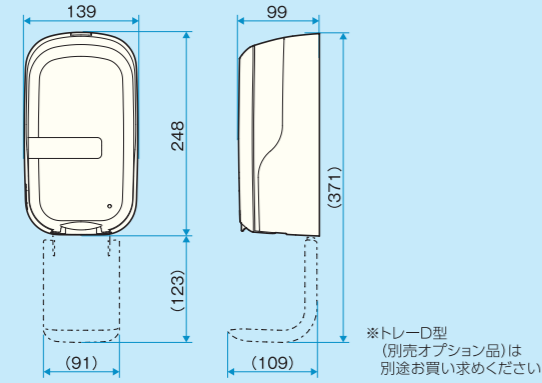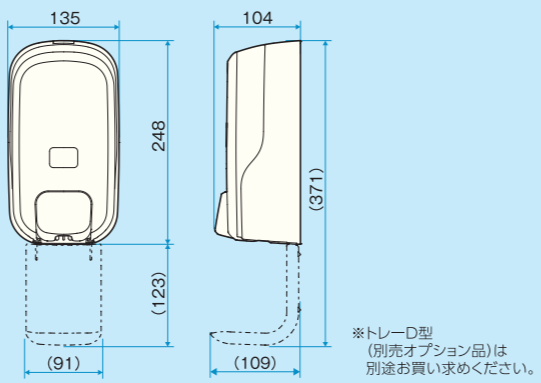名称	ノータッチ式ディスペンサー UD-9600RS / UD-9600RA	プッシュ式ディスペンサー MD-9600RS / MD-9600RA
外形図 (mm)		
本体寸法(mm)	W139×D99×H248 (オプショントレーを付けると W139×D109×H371)	W135×D104×H248 (オプショントレーを付けると W135×D109×H371)
製品質量	約715g (梱包、付属品、取付板、電池、使用液は除く)	約430g (梱包、付属品、取付板、使用液は除く)
材質	ケース全般、取付板…ABS スライド部品全般…POK/POM オプショントレー…PP	ケース全般、取付板…ABS スライド部品全般…POK レバー…POM オプショントレー…PP
電源	アルカリ乾電池 単2×4本(本製品には付属していません、当社指定のACアダプター(別売オプション品))	—
使用環境温度	5℃~40℃(使用液に適切な流動性が保たれていること)	対象薬液 当社指定の使用液
使用周囲湿度	20%~85%(結露なきこと)	容量 600mL(ディスポーザブル容器)
吐出量	●石けん(液状)…約1mL/回 ●石けん(泡状)…約0.8g/回 ●消毒剤(液状)…約1.5mL/回 ●消毒剤(ジェル状)…約1.2mL/回 ●消毒剤(泡状)…約0.8g/回	
付属品	●取扱説明書 ●火気厳禁ラベル(UD-9600RA、MD-9600RAのみ) ●取付板	

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
UD-9600RA	本体	6	41634	49-87696-41634-5
UD-9600RS	本体	6	41635	49-87696-41635-2
MD-9600RA	本体	6	41618	49-87696-41618-5
MD-9600RS	本体	6	41619	49-87696-41619-2
ホイップウォッシュ モイスト	600mL泡 UDMD用	6	42087	49-87696-42087-8
ホイップウォッシュ 無香	600mL泡 UDMD用	6	41995	49-87696-41995-7
シャボネット モイスト 販売名:薬用泡ハンドソープSB(g)	600mL泡 UDMD用	6	42092	49-87696-42092-2
弱酸性ハンドソープ	600mL泡 UDMD用	6	41941	49-87696-41941-4
シャボネットコム P-5	600mL泡 UDMD用	6	41942	49-87696-41942-1
シャボネット石鹸液F	600mL UDMD用	6	41943	49-87696-41943-8
ウォッシュボンG	600mL UDMD用	6	41946	49-87696-41946-9
サニサーラAqua Light H	600mL UDMD用	6	41739	49-87696-41739-7
サニサーラフォームSH	600mL泡 UDMD用	6	42116	49-87696-42116-5
ヒビスコールSH	600mL UDMD用	6	41944	49-87696-41944-5
ウィル・ステラVH	600mL UDMD用	6	42108	49-87696-42108-0
ウィル・ステラVHジェル	600mL UDMD用	6	42111	49-87696-42111-0
アルベット 手指消毒用 α	600mL UDMD用	6	42094	49-87696-42094-6
トレーD型	UDMD-9600用	24	41795	49-87696-41795-3
ACアダプター	—	1	47007	—
ディスペンサー用カウンター20	UD-9600用	24	41972	49-87696-41972-8
据置台	—	12	79448	—
ディスペンサー用スタンド IS-2020	本体	1	41804	49-87696-41804-2

**安全にご使用いただくために**

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 使用液をご使用の際は、当社指定の使用液をご使用ください。指定以外の使用液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。  
■ 写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なることがあります。  
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。  
■ 記載内容は2023年11月現在のものです。

**サラヤ株式会社**  
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

## 製品特徴

### 外観

キーレスロック  
鍵がなくてもロックできる構造  
鍵の管理をなくしました



UD MD

使用回数を表示 (別売オプション品)




UD



UD MD

使用液の残量が分かりやすい

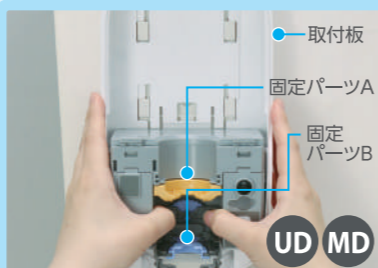

UD MD

取付板を使って簡単に設置

※固定パーツAおよび固定パーツBは[UD-9600RA]に取り付けた状態で梱包されています。[UD-9600RS]には付属していません。



UD

センサーが手を感知し自動吐出

### 内部

専用使用液はディスポーザブル容器で  
装着も簡単 ※本体に薬剤は付属していませんので別途お買い求めください。



UD MD

使用液設定ダイヤル

使用液に合わせ適切な量に調整します。



UD

使用液に合わせて、下表の数字に設定してください。

UD-9600RS (石けん液)	位置	UD-9600RA (手指消毒剤)	位置
フォーム (初期設定)	2	ジェル (初期設定)	1
リキッド	1	スプレー	3
		フォーム	2



単2アルカリ  
乾電池  
4本使用

※本体に乾電池は付属していませんので別途お買い求めください。

UD



駆動部  
ユニット化  
カバーと駆動部  
を取外し可能。  
パーツごとに  
交換可能で  
廃棄物削減。


UD



吐出回数  
切替

スイッチひとつ  
で吐出回数、  
運転オン・オフ  
を切替可能。

UD

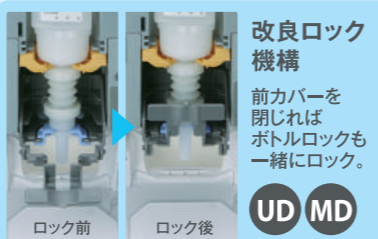

改良ロック  
機構

前カバーを  
閉じれば  
ボトルロックも  
一緒にロック。

UD MD

ロック前 ロック後

## 使用液



600mLディスペンサー用使用液 使用液汚染のリスクが少ないポンプが一体化したディスポーザブル容器でゴミの減容化にも対応しています。

### 手洗い用石けん液・手洗剤

**手洗剤**  
**ホイップウォッシュ モイスト** 泡状  
医薬部外品 泡状 無香料

有効成分としてアラントイン(抗炎症成分)を配合した弱酸性の手洗剤です。濃密泡でしっかり洗浄しながら肌の状態を整えます。保湿成分として、プラセンタエキスと浸透性アミノ酸GAF\*を配合しています。 \*ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

**手洗い石けん**  
**ホイップウォッシュ 無香** 泡状  
医薬部外品 泡状 無香料

濃密な泡が肌を包み込みやさしく洗浄します。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。プラセンタエキス(保湿成分)とローヤルゼリーエキス(肌のキメを整える成分)を配合しています。

**手洗い石けん**  
**シャボネット モイスト** 泡状  
医薬部外品 泡状 無香料

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。うるおいのある泡で洗った後に、しっとり感が残ります。

**手洗剤**  
**弱酸性ハンドソープ** 泡状  
化粧品 泡状 無香料

一日に何度も手洗いをする医療・介護従事者の手指を考慮した肌にやさしい弱酸性のハンドソープです。

**手洗い石けん**  
**シャボネットユム P-5** 泡状  
医薬部外品 泡状 無香料

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。

**手洗い石けん**  
**シャボネット石鹸液F** 液状  
医薬部外品 液状

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。シトラスグリーンの香りです。 ※取り付けには固定パーツAと固定パーツBが必要です。営業担当にご相談ください。

### 手指消毒剤

**手洗い石けん**  
**ウォッシュポンG** 液状  
医薬部外品 液状

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の乳白色の手洗い石けんです。フローラルノートの香りです。 ※取り付けには固定パーツAと固定パーツBが必要です。営業担当にご相談ください。

**速乾性手指消毒剤**  
**サニサーラAqua Light H** ジェル状  
指定医薬部外品 ジェル状

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とするジェル状の速乾性手指消毒剤です。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。とろけるように手肌になじみ繰り返しの手指消毒後もべたつきません。

**速乾性手指消毒剤**  
**サニサーラフォームSH** 泡状  
指定医薬部外品 泡状

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とする泡状の速乾性手指消毒剤です。広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。 ※取り付けの際、固定パーツA、固定パーツBは取り外してください。

**速乾性手指消毒剤**  
**ヒビスコールSH** 液状  
指定医薬部外品 液状

クロルヘキシジングルコン酸塩0.1W/v%を有効成分とし、エタノール78.7vol%を含有する速乾性手指消毒剤です。広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮します。手荒れ防止にも配慮しています。

**速乾性手指消毒剤**  
**ウィル・ステラVH** 液状  
指定医薬部外品 液状

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とする無色の速乾性手指消毒剤です。pHを酸性に調整しており、ウイルス(ノンエンベロープウイルス、エンベロープウイルス)、一般細菌(グラム陰性菌、グラム陽性菌)、真菌など、広範囲の微生物に作用します。

**速乾性手指消毒剤**  
**ウィル・ステラVHジェル\*** ジェル状  
指定医薬部外品 ジェル状

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とする無色の速乾性アルコールジェルです。pHを酸性に調整しており、ウイルス(ノンエンベロープウイルス、エンベロープウイルス)、一般細菌(グラム陰性菌、グラム陽性菌)、真菌など、広範囲の微生物に作用します。

\*ウィル・ステラVHジェルは、ノズルの先端で固まった使用液が横跳びする恐れがあるため、あらかじめノズルカバー(付属品)を装着してお使いください。

**手指消毒用アルコール** アルファ  
**アルベット 手指消毒用 α** 液状  
指定医薬部外品 液状

エタノール76.9~81.4vol%を有効成分とするアルコール消毒剤です。ノンエンベロープウイルスを含む、各種ウイルス・細菌に効果的です。食品添加物にも使用されている成分配合で、食品取扱者の手指消毒に最適です。

## 別売オプション品



**トレーD型**  
商品コード 41795

ノズル先端から床への使用液落ちを防止するために取り付ける専用のトレーです。  
※サイズ: W92×D110×H131mm



**ノータッチ式ディスペンサー用 ACアダプター**  
商品コード 47007

一般家庭用の100V電源でご使用いただけます。  
※サイズ(本体使用時): W59×D37.6×H28mm  
コード長さ: 1.8m



**UD-9600専用 ディスペンサー用 カウンター**  
商品コード 41972

ディスペンサーに接続することによって、使用回数を表示できます。ディスペンサーごとの使用状況を、簡単に把握できます。ディスペンサーから電源を供給するので電池は不要です。

**ノータッチ式ディスペンサー用 据置台**  
商品コード 79448

設置する壁やカウンターがなくても使用できるディスペンサー用据置台です。  
※サイズ: W160×D140×H450mm



**ディスペンサー用スタンド IS-2020**  
商品コード 41804

設置する壁やカウンターがなくても使用できるディスペンサー用スタンドです。  
※サイズ: W350×D350×H1,390mm



付属のパネルで  
手指消毒を啓発できます。